

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LIQUID SILICONE 5D LED FÉNYTERÁPIÁS MASZK

Ez a részletes használati útmutató segít Önnek a fényterápiás arcmaszk biztonságos és hatékony használatában. Kérjük, olvassa el figyelmesen az első használat előtt, és őrizze meg későbbi hivatkozás céljából. A termék használata előtt feltétlenül végezzen el egy fényérzékenységi tesztet, amelynek részleteit a későbbiekben találja.



Termék bemutatása és felépítése

Ez a viselhető LED fényterápiás szilikon arcmaszka egy korszerű, otthoni használatra tervezett, újratölthető fotomegfiatalító szépségápolási eszköz. A termék felületi szerkezete orvosi minőségű szilikonanyagból készült, amely biztosítja a kényelmes és egyszerű használatot. A maszk összehajtható és hordozható, az állítható csatokkal pedig különböző arcformákhoz igazítható, így széles felhasználói kör számára alkalmas.

A készülék összesen 93 kiváló minőségű LED-et tartalmaz, összesen 279 chippel. Minden LED 3 különböző hullámhosszú fényt bocsát ki: kék fény (415nm), vörös fény (633nm), valamint közeli infravörös fény (850nm és 1072nm). A vezérlővel 3 különböző energiaszintre állítható. A fényterápia elméletére alapozva a termék fényhullám-sugárzása jobban behatol a bőrbe, stimulálja a kollagén és elasztin termelését, és eléri a bőrszépítő hatást.




A csomag tartalma



Vezérlő

OLED kijelzővel és három gombbal

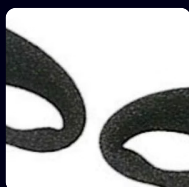

Szilikon védőszemüveg

Szemvédelem használat közben



Utazótáska

Elegáns tárolás és szállítás




Type-C kábel

Töltőkábel



Állítható pántrendszer

Biztos illeszkedés minden arcformához

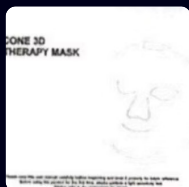

Használati útmutató

Részletes magyar nyelvű leírás

Fényterápiás módok és alkalmazásuk

A készülék két különböző fényterápiás módot kínál, amelyek különböző hullámhosszú fények kombinációit alkalmazzák a bőr állapotának javítása érdekében. Mindkét mód alapértelmezett időzítése 10 perc, amely optimális időtartam a hatékony kezeléshez anélkül, hogy túlterhelné a bőrt. A fényterápia tudományos alapokon nyugvó módszer, amely évtizedek óta bizonyítottan hatékony a bőr állapotának javításában.

2. Mód: Kék és infravörös kombináció

Hullámhosszak: 415nm + 850nm + 1072nm

Ez a mód a problémás bőr kezelésére összpontosít. A kék fény (415nm) antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, amely hatékonyan elpusztítja az aknét okozó baktériumokat. A közeli infravörös sugarak (850nm és 1072nm) pedig elősegítik a gyógyulási folyamatot és csökkentik a gyulladást. Különösen ajánlott pattanásos, zsíros vagy irritált bőr kezelésére.



1. Mód: Vörös és infravörös kombináció


Hullámhosszak: 630nm + 850nm + 1072nm

Ez a mód kifejezetten a bőr mélyebb rétegeinek stimulálására szolgál. A vörös fény (630nm) fokozza a kollagéntermelést és javítja a bőr rugalmasságát, míg a közeli infravörös sugarak (850nm és 1072nm) még mélyebbre hatolnak, elősegítve a sejtek regenerációját és a gyulladás csökkentését. Ideális ráncok, finomvonalak kezelésére és az általános bőrtónus javítására.



☐ **Szakértői tanács:** A legjobb eredmények eléréséhez heti 3-4 alkalommal használja a készüléket. Váltakozva alkalmazhatja a két módot a bőr állapotától függően. Rendszeres használat mellett az első látható eredmények 2-4 hét után várhatók.

A vezérlőegység használata és funkciói

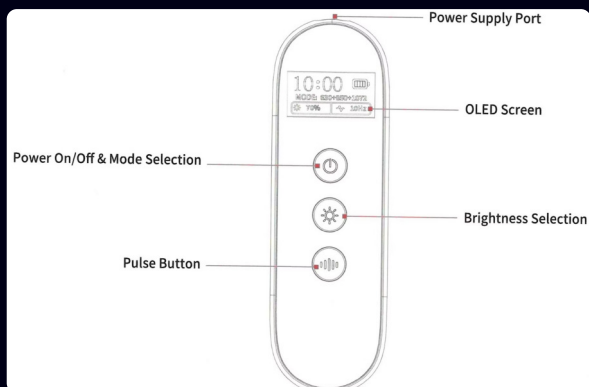

A vezérlőegység ergonomikus kialakítása lehetővé teszi a könnyű és intuitív kezelést. Az OLED kijelző világosan mutatja az aktuális beállításokat, így mindig teljes kontrollal rendelkezik a kezelés paramétereit felett. A három gomb logikus elrendezése biztosítja, hogy még sötétben is könnyen használható legyen a készülék.

01

Be-/kikapcsolás és módváltás

A felső gomb (be-/kikapcsoló): Nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig a bekapcsoláshoz. A fény bekapcsolása után rövid megnyomással válthat a 2 mód között. A kikapcsoláshoz ismét tartsa lenyomva 3 másodpercig.

02

Fényerősség szabályozás

A középső gomb (fényerősség): Rövid megnyomással válthat a 3 energiaszint között: 50%, 75% és 100%. Kezdként ajánlott az 50%-os beállítással kezdeni, majd fokozatosan növelni az intenzitást, ahogy a bőr hozzászokik a kezeléshez.

03

Pulzáló funkció aktiválása

Az alsó gomb (pulzus): Bármely módban megnyomhatja ezt a gombot a 10Hz-es pulzáló fény funkció be- vagy kikapcsolásához. A pulzáló fény fokozhatja a kezelés hatékonyságát azáltal, hogy dinamikus stimulációt biztosít a bőrsejteknek.

04

Automatikus időzítés

Mindkét mód alapértelmezett időtartama 10 perc, amely után a készülék automatikusan kikapcsol. Ez megakadályozza a túlzott expozíciót és biztosítja az optimális kezelési időt. Az OLED kijelzőn visszaszámlálóként láthatja a hátralévő időt.

Műszaki specifikációk és jellemzők



Típuszám

G17 modell - legújabb generációs fényterápiás eszköz



Akkumulátor kapacitás

4000mAh nagyteljesítményű újratölthető akkumulátor



Töltési idő

Körülbelül 2 óra a teljes feltöltéshez

Részletes funkcionális áttekintés

Működési módok	2 különböző fényterápiás mód M1: 630+850+1072nm (alapértelmezett 10 perc) M2: 415+850+1072nm (alapértelmezett 10 perc)
Fényerősség szintek	Három beállítható intenzitás: 50%, 75%, 100% Fokozatosan állítható a bőr érzékenységtől függően
Pulzus funkció	10Hz frekvenciájú pulzáló fény opció Növeli a kezelés hatékonyságát dinamikus stimulációval
LED technológia	93 darab kiváló minőségű LED, összesen 279 chip Egyszerű fényeloszlás az arc teljes felületén
Anyagminőség	Orvosi minőségű folyékony szilikon Hipoallergén, biztonságos hosszú távú bőrkontaktusra
Használati időtartam	Egy töltéssel több kezelés is elvégezhető Ajánlott használat: heti 3-4 alkalom, 10-20 perc/kezelés

A készülék kialakítása modern technológiát ötvöz a felhasználóbarát dizájnnal. Az ergonomikus forma biztosítja a kényelmes viselést még hosszabb kezeléseknél is, míg a könnyű súly miatt alig érezhető az arcon. Az orvosi minőségű szilikon anyag puha, flexibilis és hipoallergén tulajdonságai miatt minden bőrtípusra alkalmas, még az érzékeny bőrűek számára is.

Használati útmutató lépésről lépésre

Fényérzékenységi teszt - Kötelező első lépés

- ☐ **FONTOS FIGYELMEZTETÉS:** NE HASZNÁLJA ezt a terméket, ha Ön terhes, terhességre készül, szoptat, fényérzékeny bőrrel rendelkezik, vagy olyan gyógyszert szed, amely fotoszenzitivitást okozhat. Örökletes szemproblémák (például lupus erythematosus, fotoszenzitív ekcéma vagy albinizmus) esetén szintén kerülje a használatot.

Előzetes bőrteszt végrehajtása

Helyezze a készüléket a karjára, és kapcsolja be 10 percre. Ha a bőrön vörösség, viszketés vagy bármilyen irritáció jelentkezik, ez fotoszenzitív bőrre utalhat. Ilyen esetben azonnal hagyja abba a használatot, és konzultáljon bőrgyógyással a további használat előtt. Ez a teszt elengedhetetlen a biztonságos alkalmazáshoz.

Arc előkészítése a kezelésre

Használat előtt alaposan tisztítsa meg az arcát, és hagyja teljesen megszáradni. Ne használjon semmilyen kozmetikumot, krémet vagy szérumot, mert ezek fotoszenzitív összetevőket tartalmazhatnak, amelyek befolyásolhatják a kezelés hatékonyságát vagy nemkívánatos bőrreakciókat okozhatnak. A tiszta, száraz bőr biztosítja a fényterápia optimális hatását.

A maszk helyes felhelyezése

Helyezze fel a maszkot az arcára úgy, hogy a kivágások pontosan illeszkedjenek a szemekhez, orrhoz és szájhoz. Használja az állítható pántokat az arc körüli biztos, de kényelmes illeszkedés eléréséhez. Fontos, hogy a védőszemüveget is helyezze fel a szemekre a fénytől való védelem érdekében. Ajánlott csukott szemmel végezni a kezelést a maximális komfort és biztonság érdekében.

Kezelés utáni teendők

Használat után a bőr enyhén kipirulhat, ami teljesen normális reakció. Ez általában 1-2 órán belül elmúlik. Ha bármilyen égető érzést vagy kellemetlen tünetet tapasztal a kezelés során, azonnal állítsa le a használatot. A kezelés után javasolt hidratáló krém vagy szérumot alkalmazni a bőr ápolása érdekében.

Optimális használati protokoll

A legjobb eredmények eléréséhez kövesse ezt az ütemtervet: használja a készüléket heti 3-4 alkalommal, minden kezelés időtartama 10-20 perc között legyen. Kezdetben ajánlott a rövidebb kezelési idővel és az alacsonyabb fényerősséggel (50%) kezdeni, majd fokozatosan növelni mindkettőt, ahogy a bőr megszokja a fényterápiát. A rendszeres használat kulcsfontosságú a tartós eredmények eléréséhez. Az első látható javulás általában 2-4 hét rendszeres használat után jelentkezik, de az optimális eredmények 8-12 hét után várhatók.

Biztonsági óvintézkedések és figyelmeztetések

A készülék biztonságos és hatékony használata érdekében alapvető fontosságú, hogy betartsa az alábbi biztonsági előírásokat. Ezek az irányelvek az Ön egészségének védelme és a készülék hosszú élettartamának biztosítása érdekében készültek.

1

1. Helyes használat és alkalmazás

Szigorúan kövesse a termék helyes használati módját, és ne alkalmazza a készüléket az útmutatóban meghatározottaktól eltérő célokra. A nem rendeltetésszerű használat készülék meghibásodáshoz vagy váratlan balesetekhez vezethet. A készülék kizárólag kozmetikai célú arckezelésre szolgál.

2

2. Kontraindikációk és korlátozások

Ne használja a terméket semmilyen orvosi állapot javítására, csak a megjelölt kozmetikai célokra. Terhes nők, szoptató anyák és gyermekek számára a termék használata tilos. Ha fizikai, érzékszervi vagy mentális betegségben szenved, vagy dermatológiai kezelés alatt áll (például lupus erythematosus, fotoszenzitív ekcéma vagy albinizmus esetén), ne használja a terméket, kivéve orvosi felügyelet mellett.

3

3. Fotoszenzitivitás és gyógyszerek

Ha fotoszenzitív zavarban (fényérzékenység) szenved, ne használja ezt a terméket, mert súlyos bőrreakciókat okozhat. Ne használja ugyanazon a napon fotoszenzitív összetevőket tartalmazó bőrápolási termékekkel együtt, beleértve bizonyos illatanyagokat, citrusos olajokat vagy retinolos készítményeket.

4

4. Szemvédelem és különleges óvintézkedések

Használat közben fordítson különös figyelmet a szemek védelmére. Helyesen viselje a mellékelt szemvédőt, és ajánlott csukott szemmel végezni a kezelést. Ha örökletes szemproblémával rendelkezik, ne használja a készüléket. Az intenzív fény károsíthatja a szem érzékeny szöveteit megfelelő védelem nélkül.

5

5. Vízálló tulajdonságok hiánya

Ez a termék NEM vízálló. Soha ne merítse vízbe a készüléket, és ne öblítse le vízzel. Ha úgy gondolja, hogy vízzel érintkezett, ne használja. A nedvesség károsíthatja az elektronikus alkatrészeket és veszélyes meghibásodást okozhat. A tisztításhoz használjon enyhén nedves, majd száraz törlőkendőt.

6

6. Gyermekek védelme és tárolás

Ne használja a terméket csecsemőknél vagy gyermekeknél. Tárolja gyermekektől elzárt helyen, lehetőleg a mellékelt utazótáskában. A készülék kis alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladásveszélyt jelenthetnek, valamint a fényterápia nem alkalmazható a fejlődő bőrre.

7

7. Karbantartás és javítás

Ha bármely alkatrész sérült, ne használja a terméket. Ez a termék kizárólag napi használatra szolgál. Ne szerelje szét, ne módosítsa, és ne javítsa saját kezűleg, engedély nélkül. A jogosulatlan beavatkozás érvényteleníti a garanciát és súlyos biztonsági kockázatot jelenthet.

8

8. Komfortérzet és biztonság

Ha a termék használata során bármilyen kellemetlen érzés, égő fájdalom, túlzott vörösség vagy bármilyen egyéb diszkomfort jelentkezik, azonnal állítsa le a használatot. Minden szokatlan bőrreakció esetén forduljon orvoshoz. A normál reakciók közé tartozik az enyhe, átmeneti bőrpír.

Karbantartás, tisztítás és támogatás



A készülék megfelelő karbantartása és tisztítása kulcsfontosságú a hosszú élettartam és az optimális teljesítmény fenntartása érdekében. Rendszeres ápolással biztosíthatja, hogy a fényterápiás maszk éveken át megbízhatóan működjön és hatékony kezeléseket nyújtson.

Tisztítási útmutató



Áramtalanítás

Mindig kapcsolja ki és válassza le a készüléket minden tisztítás előtt



Óvatos törlés

Használjon enyhén nedves, puha törölkendőt a szilikon felület megtisztításához



Teljes szárítás

Hagyja teljesen megszáradni a maszkot tárolás vagy újbóli használat előtt

Tárolási javaslatok

Használat után tisztítsa meg a maszkot és tárolja a mellékelt utazótáskában száraz, hűvös helyen, távol a közvetlen naptól és hőforrásoktól. A vezérlőegységet és a kábelt ugyancsak a táskában tartsa a sérülések elkerülése végett. Ne hajtogassa vagy nyomja össze erősen a maszkot, mert ez károsíthatja a belső LED-eket és kábelezést.

Akkumulátor karbantartása

Rendszeres töltés

Ne hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort. Töltse fel a készüléket, amikor az energiaszint 20% alá csökken a hosszú akkumulátor-élettartam érdekében.

Tárolás töltéssel

Ha hosszabb ideig nem használja (több hét vagy hónap), tárolja 50-70%-os töltöttségi szinten, és 2-3 havonta töltse fel az akkumulátor egészségének megőrzése érdekében.

Megfelelő töltési körülmények

Töltse a készüléket szobahőmérsékleten (15-25°C között) az optimális töltési teljesítmény és az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében.

Gyakori kérdések és támogatás

Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, vagy technikai problémát tapasztal, ne habozzon kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal. A rendszeres karbantartás és a helyes használati útmutatások betartásával éveken át élvezheti a professzionális minőségű otthoni fényterápiás kezeléseket. Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta szépségápolási rutinjához!